



Purple

PLACA PURPLE

Placa anatómica de bajo perfil con estabilidad angular para fracturas de húmero proximal.





PLACA PURPLE


Placa anatómica de bajo perfil con estabilidad angular para fracturas de húmero proximal.

- La posición ideal para la colocación de la placa es a 15 mm. del borde proximal de la tuberosidad mayor, por fuera del troquiter, a lo largo del canal bicipital, para evitar posibles conflictos con el acromion.
- Guías rápidas de bloqueo descartables con preorientación de tornillos para su correcta aplicación.
- Tornillos de bloqueo Torx, proporcionan excelente reconstrucción sólida y estable de la epífisis proximal del humero, dando respuestas a un amplio espectro de fracturas.
- Bordes de placa biselados diseñados para reducir la irritación.

Set de Placas

2835-003	Placa Purple bloqueada 3.5 mm 3 orificios derecha titanio
2835-004	Placa Purple bloqueada 3.5 mm 4 orificios derecha titanio
2835-005	Placa Purple bloqueada 3.5 mm 5 orificios derecha titanio
2836-003	Placa Purple bloqueada 3.5 mm 3 orificios izquierda titanio
2836-004	Placa Purple bloqueada 3.5 mm 4 orificios izquierda titanio
2836-005	Placa Purple bloqueada 3.5 mm 5 orificios izquierda titanio

Sistema TORX

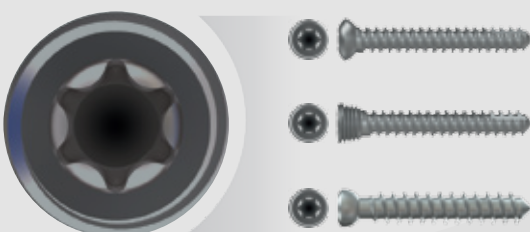

Set de Tornillos

0987	Tornillo cortical S2 3.5 mm. titanio <i>Medidas (mm): 20-22-24-26-28-30-35-40-45-50-55-60</i>
0988	Tornillo cortical S2 bloqueado 3.5 mm. titanio <i>Medidas (mm): 20-22-24-26-28-30-35-40-45-50-55-60</i>
0943	Tornillo esponjoso RT S2 4.0 mm. titanio <i>Medidas (mm): 30-35-40-45-50-55-60</i>

